


**ANPASSUNGSANLEITUNG**

- 1 Dieser Lithos Pro Mundschutz muss nicht gekocht oder individuell angepasst werden. Den Mundschutz in den Mund nehmen und vorsichtig über die feste Zahnsperre führen. Dabei sicherstellen, dass die Zahnsperre am integrierten Kanal ausgerichtet ist. Bei richtiger Positionierung sitzt dieser Mundschutz sicher und angenehm.

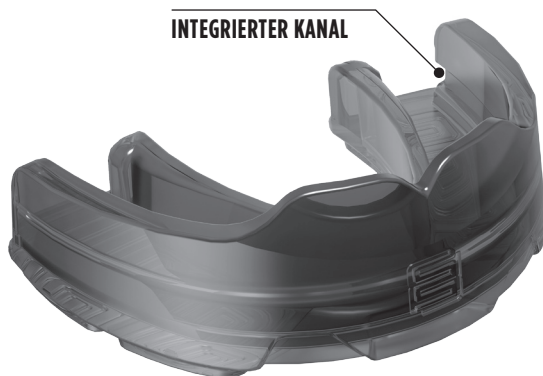

- 2 Den Mundschutz vorsichtig entnehmen, um zu verhindern, dass sich Brackets lösen.
- 3 Dieser Lithos Pro Mundschutz muss nicht „bearbeitet“ werden, d. h. es ist nicht erlaubt, ihn für eine bessere und angenehmere Passform zu beschneiden.

**Diese Broschüre aufheben, da sie für den Benutzer wichtige Informationen enthält.**

## WARNUNG!

Vor Verwendung dieses Mundschutzes bitte sicherstellen, dass die folgenden Sicherheitshinweise und die Benutzeranleitung gelesen und vollständig verstanden wurden:

**Dieser Mundschutz ist für die Verwendung mit einer Zahnsperre vorgesehen. Es muss mit einem Zahnarzt oder Kieferorthopäden, der eine Zahnsperre oder eine andere Vorrichtung auf die Zähne anpasst, besprochen werden, ob sich dieser Mundschutz eignet. Dieser Mundschutz sollte nur mit der Erlaubnis der Person, die die Zahnsperre anpasst, verwendet werden.**

**NICHT auf dem Mundschutz herumbeißen.**

Herumbeißen auf dem Mundstück und/oder eine falsche Verwendung führen dazu, dass es deutlich schlechter sitzt, einen deutlich geringeren Schutz bietet und seine Lebensdauer deutlich verkürzt wird. Bitte die umseitige Anpassungsanleitung genau befolgen. Der vorgesehene Benutzer dieses Lithos Pro Mundschutzes muss sicherstellen, dass sein Name auf dem Etikett in der Aufbewahrungsbox und an der vorgesehenen Stelle unten im Mundschutz Benutzerhandbuch eingetragen wird.

**Dieser Mundschutz darf von keiner anderen Person als der im Mundschutz Benutzerhandbuch und in der Aufbewahrungsbox genannten verwendet.**

**Bei Trägern, deren Kiefer noch nicht ausgewachsen ist, bei denen das Milchgebiss ausfällt und das bleibende Gebiss durchbricht, muss die Passform des Mundschutzes regelmäßig von einer verantwortlichen Aufsichtsperson überprüft werden. Wenn der Mundschutz für die Zähne oder das Zahnfleisch zu locker oder zu eng ist, muss er ersetzt werden.**

## MUNDSCHUTZ BENUTZERHANDBUCH

- **Dieser Mundschutz ist für die Verwendung mit einer Zahnsperre vorgesehen. Es muss mit einem Zahnarzt oder Kieferorthopäden, der eine Zahnsperre oder eine andere Vorrichtung auf die Zähne anpasst, besprochen werden, ob sich dieser Mundschutz eignet. Dieser Mundschutz sollte nur mit der Erlaubnis der Person, die die Zahnsperre anpasst, verwendet werden.**
- Dieses Paket enthält wichtige Informationen und muss zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
- Dieser Lithos Pro (Vorgeformter Mundschutz) erfüllt DD 253: 2001 und hat die Schlagtests für Leistungsniveau 2 bestanden. Er eignet sich deshalb für Kontaktsportarten und Freizeitaktivitäten mit weniger Körperkontakt wie Baseball, Basketball, Cricket, Fußball, Hockey, Lacrosse, Kampfsport, Rugby und andere Kontaktsportarten.
- Es gibt zwei Schlag-Leistungsniveaus, mit denen nach DD 253: 2001 zugelassene Mundschutze ausgezeichnet werden können - 1 und 2. Dabei bietet Niveau 1 den geringsten Schutz und Niveau 2 den höchsten Schutz.
- Bei der Auswahl eines Mundschutzes muss auf die richtige Größe und den richtigen Typ in Abhängigkeit von den vom Hersteller angegebenen Altersangaben geachtet werden. Es muss sichergestellt werden, dass sich der Typ und das Leistungsniveau des gewählten Mundschutzes für den Sport oder die Freizeitaktivität eigenen, für die er eingesetzt werden soll. Es liegt eine Liste aller sportlichen Aktivitäten bei, für die dieser Mundschutz als geeignet vorgesehen ist.
- Umseitig unter Anpassungsanleitung sind die vollständigen Informationen zur Anpassung zu finden.
- Bei Benutzern, deren Kiefer noch wächst, muss die Passform des Mundschutzes regelmäßig überprüft werden. Wenn der Mundschutz nicht mehr richtig passt, muss er ersetzt werden.
- Die Verwendung des Mundschutzes als Aufbisschiene bitte zuvor mit dem Zahnarzt oder Kieferorthopäden besprechen.
- Dieser Mundschutz besteht aus für medizinische Zwecke geeignetem Silikonkautschuk.
- Die im Lieferumfang enthaltene Box ermöglicht eine sichere, saubere Aufbewahrung des Mundschutzes. Den Mundschutz in der Box aufbewahren, wenn dieser nicht verwendet wird. Sowohl den Mundschutz als auch die Box nach jeder Verwendung mit frischem Wasser spülen (nicht über 35 °C). Den Mundschutz vor der Aufbewahrung gründlich abtrocknen.
- Dieser Lithos Pro Mundschutz darf ausschließlich verwendet werden durch \_\_\_\_\_ Ab dem folgenden Datum \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_
- Abhängig von der Häufigkeit und der Intensität der Verwendung des Mundschutzes empfiehlt Makura Sport, ihn alle 2 Jahre zu ersetzen. Es muss allerdings nach jeder Verwendung eine Sichtprüfung des Mundschutzes durchgeführt werden. Den Mundschutz sofort austauschen, wenn die Bissfläche abgenutzt, rissig oder gespalten ist.
- Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn der Mundschutz eine sensibilisierende oder allergische Reaktion hervorruft oder wenn nach dem Tragen Unwohlsein auftritt.
- Dieser vorgeformte Mundschutz wurde von SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way, Telford Way Industrial Estate, Kettering, Northamptonshire NN16 8SD, Vereinigtes Königreich (benannte Stelle Nummer 0321) getestet und zugelassen.

**Dieser Mundschutz enthält kein Latex. Nach derzeitigem Wissensstand verursachen die verwendeten Materialien keine allergischen oder sensibilisierenden Reaktionen.**